

Diretrizes recomendadas para o perfilador ósseo

Descrição do produto

Os perfiladores ósseos Zimmer Biomet Dental são utilizados para auxiliar na remoção/contorno óssea ao redor da região coronal do implante, permitindo a colocação adequada dos pilares de cicatrização, componentes protéticos, coifas de impressão e restaurações finais. Este passo de contorno pode ser aplicado em protocolos cirúrgicos de uma ou de duas etapas. É particularmente útil para a colocação de implantes a nível subcrestal, mas também pode ser utilizado em implantes colocados ao nível da crista óssea, conforme necessário.

Cada perfilador ósseo apresenta um design de conexão e fecho com compatibilidade ISO e pode ser utilizado com:

- Um contra-ângulo para uma utilização mecanizada
- Adaptador ISO 1797 para a chave de catraca com indicador de baixo torque [Item #: C9980] para facilitar o uso manual



Considerações Importantes

- Os perfiladores ósseos da Zimmer Biomet Dental foram concebidos para serem utilizados com os seguintes implantes dentários: Certain®, Hexágono Externo, Tapered Screw-Vent® (TSV®)/Trabecular Metal™ e Eztetic®.
- Os perfiladores ósseos são fornecidos não esterilizados. Os perfiladores ósseos são reutilizáveis até 15 utilizações e é necessário proceder à sua limpeza e esterilização antes de cada utilização. Para obter informações quanto aos procedimentos de limpeza e esterilização de perfiladores ósseos, consulte o documento **Cleaning and Sterilization of Biomet 3i Kits and Instruments (Limpeza e Esterilização de Kits e Instrumentos Biomet 3i)(P-ZBDINSTRP) disponível em <http://ifu.biomet3i.com/>**. Para a esterilização, aplique os parâmetros para instrumentos individuais.
- Os perfiladores ósseos devem ser inspecionados quanto a sinais de desgaste antes de cada utilização.
- A velocidade recomendada para o perfilador ósseo é de valor igual ou inferior a 50 rpm. Um número de rpm superior a esse valor pode danificar a superfície ou a estrutura interna do implante.
- Certifique-se de que o perfilador ósseo está engatado/retido no contra-ângulo de modo a evitar a deglutição ou aspiração acidental.
- O perfilador ósseo deve estar totalmente assente no local do implante antes da utilização. A ativação do perfilador ósseo antes da sua colocação pode danificar a parte superior ou a estrutura interna do implante.

Instruções de utilização

1. Fixe o perfilador ósseo à chave de transferência apropriada.
 - Utilização mecanizada – contra-ângulo.
 - Uso manual - Adaptador ISO 1797 para a chave de catraca com baixo torque [C9980].

NOTA: Se aplicável, remova o excesso de osso que possa ter crescido sobre o parafuso de fecho e remova-o, antes do uso do perfilador ósseo.




2. Insira o perfilador ósseo no implante colocado. Certifique-se de que o pino guia do perfilador ósseo está alinhado de modo coaxial ao implante.



3. Assim que o perfilador ósseo estiver assente no local do implante:
 - Utilização mecanizada – inicie a rotação da broca a um valor igual ou inferior a 50 rpm, no sentido dos ponteiros do relógio.
 - Utilização manual – inicie a rotação do perfilador ósseo no sentido dos ponteiros do relógio.

Aplique pressão na direção do implante. O perfilador ósseo vai desbastar gradualmente o excesso de osso em torno da região coronal do implante, para permitir o assentamento completo dos componentes protéticos.

NOTE: Para um corte ideal, certifique-se de que os dentes cortantes estejam livres de detritos acumulados. O excesso de detritos pode resultar em um desempenho insatisfatório do perfilador de Osso, o que pode causar danos à conexão do implante.

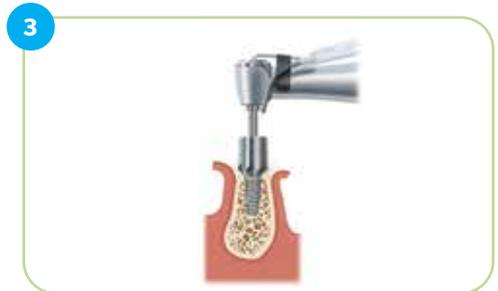

4. Continue a desbastar o osso até que o perfilador ósseo deixe de remover osso e o excesso ósseo tenha sido suficientemente reduzido para permitir o assentamento adequado dos componentes protéticos.

NOTA: Certifique-se de que a plataforma de implante está livre de detritos ósseos antes de colocar o componente de restauração.



Contacte-nos através do número 800 827 836 ou visite o site zimmerbiometdental.pt

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
zb.pedidos@zimmerbiomet.com

