

# Monconi Conici Angolati Zimmer®

## Scopri la libertà di scelta.

I Monconi Conici Angolati Zimmer consentono di scegliere il miglior protocollo implantare per i propri pazienti.

### Resistenza e durabilità

- I Monconi Conici Angolati Zimmer Angolati a 30° sono più resistenti del 25% rispetto ai monconi Multi-unit Nobel Biocare® angolati a 30° nei test di resistenza alla fatica e mostrano una robustezza di oltre l'80% maggiore nei test di resistenza alla compressione.<sup>1</sup>
- La vite di ritenzione protesica Zimmer ha dimostrato di trattenere oltre il 50% di torque in più rispetto alle viti di ritenzione protesiche Nobel Biocare nei test di ritenzione dinamica.<sup>1</sup> In letteratura è stato riportato che la perdita di torque (precaricato) è la causa maggiore di allentamento della vite.<sup>2,3</sup>

### Compatibilità

- I Monconi Conici Angolati Zimmer sfruttano la medesima piattaforma protesica dei Monconi Conici e pertanto non vi è alcuna necessità di familiarizzarsi con nuove tecniche di restauro.
- I componenti di restauro intercambiabili riducono al minimo i controlli delle scorte e la necessità di rifornimento per lo studio professionale.

### Facilità d'uso

- Lo strumento portamoncone viene fornito premontato ed è progettato per agevolare il facile rilascio e posizionamento dei monconi.
- Lo strumento portamoncone a basso profilo ne consente l'uso nei casi di spazio interocclusale limitato.




## Possibilità di inserire impianti fuori asse con ampliamento delle opzioni chirurgiche

I Monconi Conici Angolati Zimmer consentono di impiegare protocolli chirurgici che prevedono l'inserimento di impianti fuori asse, in modo da:

- Sfruttare al massimo l'osso disponibile
- Evitare il nervo alveolare e il seno mascellare
- Ridurre al minimo la lunghezza dell'estremità in estensione della protesi



## Panoramica sul nuovo Moncone Conico Angolato Zimmer

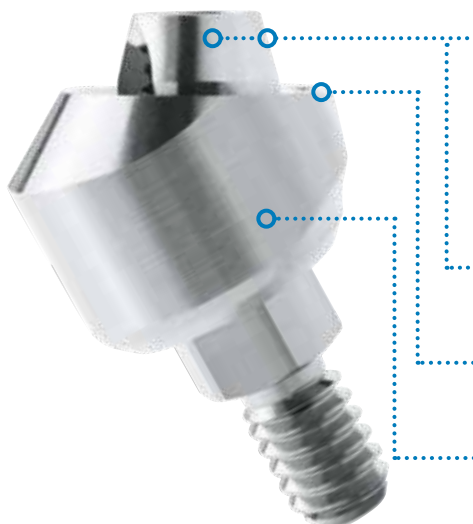

- Fornisce la correzione dell'angolazione per l'inserimento di impianti fuori asse
  - **Moncone Conico Angolato 15°**: corregge divergenze fino a 30°
  - **Moncone Conico Angolato 30°**: corregge divergenze fino a 45°
- **L'inclinazione a 15° del cono** consente di eseguire un'ulteriore correzione dell'angolazione di 15°
- **Il cono a basso profilo da 1,2 mm** ne consente l'utilizzo nei casi di spazio interocclusale limitato
- **Il design angolato** ricolloca la piattaforma protesica per migliorare l'accesso alla vite protesica e facilitare il tragitto di inserimento della protesi
- **La cuffia disponibile in varie altezze** consente una selezione maggiormente personalizzata basata sulle dimensioni del tessuto molle del paziente

### Moncone Conico Angolato 15° (inclusa vite di ritenzione preassemblata)

Codice articolo	15AT312	15AT323	15AT334	15AT412	15AT423	15AT434
Piattaforma implantare	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm
Altezza cuffia (a/b)	1,0 mm / 2,0 mm	2,0 mm / 3,0 mm	3,0 mm / 4,0 mm	1,0 mm / 2,0 mm	2,0 mm / 3,0 mm	3,0 mm / 4,0 mm



### Moncone Conico Angolato, 30° (inclusa vite di ritenzione preassemblata)

Codice articolo	30AT324	30AT335	30AT346	30AT424	30AT435	30AT446
Piattaforma implantare	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm
Altezza cuffia (a/b)	2,0 mm / 4,0 mm	3,0 mm / 5,0 mm	4,0 mm / 6,0 mm	2,0 mm / 4,0 mm	3,0 mm / 5,0 mm	4,0 mm / 6,0 mm



1. Maggay A. Piliers coniques angulés Zimmer Dental®. Solution pour les protocoles d'implants inclinés. IMPLANT 2012;N° SPÉCIAL:S111-S114.

2. Winkler S, Ring K, Ring JD, Boberick KG. Implant screw mechanics and the settling effect: an overview. J Oral Implantol. 2003;34:242-245.

3. Vogel RE, Davliakos JP. Spline™ implant prospective multicenter study: interim report on prosthetic screw stability in partially edentulous patients. J Esthet Restor Dent. 2002;14:225-237.

Per informazioni: +39 0438 37681 o [zimmerdental.it](http://zimmerdental.it)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Tel: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl  
Viale Italia n. 205/D  
31015 Conegliano (TV)  
Tel.: +39 0438 37681  
Fax: +39 0438 553181  
[zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com](mailto:zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com)

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuite e commercializzate da Zimmer Biomet Dental (e, per quanto riguarda la distribuzione e il marketing, i suoi Marketing Partner Autorizzati). Nobel Biocare è un marchio di fabbrica registrato di Nobel Biocare Services AG. Per ulteriori informazioni, consultare le indicazioni, le etichette o le istruzioni per l'uso allegate a ciascun prodotto. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi/regioni. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZB0054IT REV A 08/17 ©2017 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

